



## Web Tabanlı

Aşı Dolabı Stok Yönetimi ve Sıcaklık Takip Yazılımı

**sensorium**  
Temperature Monitoring System

İnternet olan her yerden  
ısı analizleri alınır.

Web tabanlı karekod destekli ilaç depo takibi yapılır.

Kullanım Kılavuzu



[www.sensorium.com.tr](http://www.sensorium.com.tr)

## Ana Ekran



Her 5 dakika da bir, dolaplarda alınan sıcaklık ve nem değerleri anlık olarak izlenebilir.

Eczane Depo 1 Stok Listesi - Toplam İlaç Sayısı: 8

| Barkod                                                                                                          | Lot No     | Seri No        | SKT        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ROTARIX Oral Aşı 1x1 ml'lik flakon (Mevcut Miktar: 2)</b>                                                    |            |                |            |
| 08699522967513                                                                                                  | A41CB140A  | 20340310031510 | 31.08.2012 |
| 08699522967513                                                                                                  | A41CB140A  | 20340310031174 | 31.08.2012 |
| <b>VARİLRIX SC Aşı 10 PFU/0.5 ml 1x0.5 ml'lik flakon (Mevcut Miktar: 2)</b>                                     |            |                |            |
| 08699522967452                                                                                                  | A70CB619A  | 30147020093308 | 31.10.2012 |
| 08699522967452                                                                                                  | A70CB509A  | 20267380129771 | 30.04.2012 |
| <b>HAVRİX İM Pediatrik Aşı 720 mcg/0.5 ml 1x0.5 ml'lik kullanıma hazır enjektör (Mevcut Miktar: 3)</b>          |            |                |            |
| 08699522967322                                                                                                  | AHAVB366AE | 30147040031551 | 31.03.2012 |
| 08699522967322                                                                                                  | AHAVB366AE | 30106350159211 | 31.03.2012 |
| 08699522967322                                                                                                  | AHAVB366AE | 30147040031446 | 31.03.2012 |
| <b>ADACEL POLİO İM Kullanıma Hazır Enjektör 0.5 ml 1x0.5 ml'lik kullanıma hazır enjektör (Mevcut Miktar: 1)</b> |            |                |            |
| 08699625960428                                                                                                  | E1007      | 270458         | 30.06.2012 |

Dolap isimlerine tıkladığında, anlık stok durumu gözlemlenebilir.



## Stok Giriş

**sensorium** Temperature Monitoring System

Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Karekod okuyunuz ile stok girişi için tıklayınız.

Karekodunu okuturak Aşı - İlaç girişi yapmak istediğiniz dolabı seçiniz.

Stok Giriş

Lütfen Dolap Seçiniz

Lütfen Dolap Seçiniz

Dolap 2

Dolap 3

Dolap 4

Dolap 5

Dolap 6

Dolap 7

**sensorium** Temperature Monitoring System

Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Stok Giriş

Dolap 2

Stok girişi yapmak istediğiniz ürünün karekodunu okutunuz. Okuttuğunuz ürünün Dolap 2'ye girişi yapmış olacaksınız.

## Stok Çıkış

**sensorium** Temperature Monitoring System

Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Karekod okuyunuz ile stok çıkışı için tıklayınız.

Karekodunu okuturak Aşı - İlaç çıkışı yapmak istediğiniz dolabı seçiniz.

Stok Çıkış

Lütfen Dolap Seçiniz

Lütfen Dolap Seçiniz

Dolap 2

Dolap 3

Dolap 4

Dolap 5

Dolap 6

Dolap 7

**sensorium** Temperature Monitoring System

Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Stok Çıkış

Dolap 2

Stok çıkışı yapmak istediğiniz ürünün karekodunu okutunuz. Okuttuğunuz ürünün Dolap 2'den çıkışı yapmış olacaksınız.

## Stok Raporları

Stok Raporu

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Dolap   
Dolap 3  
Dolap 4  
Dolap 5

Rapor Tipi   
Stok Hareket Raporları  
Mevcut İlaç Stokları

Dolaplarındaki mevcut stok durumunu ve stok hareketlerini görmek için tıklayınız.

Stok raporunu almak istediğiniz tarih aralığını seçiniz.

Stok raporunu almak istediğiniz dolap ya da dolapları seçiniz.

Almak istediğiniz stok rapor tipini seçiniz.

Stok Raporu

Başlangıç Tarihi 07.09.2011

Bitiş Tarihi 14.09.2011

Dolap   
Dolap 3  
Dolap 4  
Dolap 5

Rapor Tipi   
Stok Hareket Raporları

Gönder

Yapılan seçimlere göre oluşan rapor aşağıdadır.

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

Copy CSV Excel PDF Print

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 2 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:26 | Çıkış |
| Dolap 2 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:26 | Çıkış |
| Dolap 2 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:26 | Çıkış |
| Dolap 2 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:26 | Çıkış |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

Toplam 8 kayıttan 1 ve 8 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

## Stok Raporları

**Stok Raporu**

Başlangıç Tarihi: 07.09.2011

Bitiş Tarihi: 14.09.2011

Dolap: Dolap 4, Dolap 5, Dolap 6, Dolap 7

Rapor Tipi: Mevcut İlaç Stokları

Yapılan seçimlere göre oluşan rapor aşağıdadır.

Her sayfada 10 kayıt göster

Ara:

| Dolap   | İlaç Adı    | Barkod         | Lot No     | Seri No        | SKT        |
|---------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Dolap 2 | Varilix     | 08699522967452 | 0000000004 | 12345678900004 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | Varilix     | 08699522967452 | 0000000003 | 12345678900003 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | Varilix     | 08699522967452 | 0000000002 | 12345678900002 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | Varilix     | 08699522967452 | 0000000001 | 12345678900001 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | Varilix     | 08699522967452 | 0000000005 | 12345678900005 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | M-M-R II SC | 08699636960202 | 0000000001 | 12345678900001 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | M-M-R II SC | 08699636960202 | 0000000002 | 12345678900002 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | M-M-R II SC | 08699636960202 | 0000000003 | 12345678900003 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | M-M-R II SC | 08699636960202 | 0000000004 | 12345678900004 | 04.09.2012 |
| Dolap 2 | M-M-R II SC | 08699636960202 | 0000000005 | 12345678900005 | 04.09.2012 |

Toplam 136 kayıttan 1 ve 10 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki Son Sayfa

Raporu yazdırmak için tıklayınız.

Copy CSV Excel PDF **Print**

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

### Baskı Önizleme

Bu dosyayı yazdırmak için lütfen tarayıcınızın YAZDIRMA  
ÖZELLİĞİ'ni kullanın. Yazdırma işleminden sonra lütfen  
ESC(escape) tuşuna basınız.

## Stok Raporları

**sensorium** Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu PDF formatında bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız.

Copy CSV Excel **PDF** Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

**Sensorium.pdf - Adobe Reader**

File Edit View Window Help

1 / 1 101%

Comment Share

Sensorium

Stok Raporu

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giris |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giris |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giris |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giris |

Alınan raporun PDF'e dönüştürülmesi

**sensorium** Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu Excel formatında bilgisayarınıza kaydetmek için tıklayınız.

Copy CSV **Excel** PDF Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

**Sensorium.csv - Microsoft Excel**

Giriş Ekle Sayfa Düzeni Formüller Veri Gözden Geçir Görünüm Eklentiler

Calibri 11 A A Genel Koşullu Biçimlendirme Tablo Olarak Biçimlendir Hücre Stilleri Ekle Sil Biçim Sırala ve Filtre Uygula Bul ve Seç

Pano Yazı Tipi Hizalama Sayı Stiller Hücreler Düzenleme

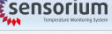
|    | A       | B        | C             | D         | E              | F      | G          | H                | I     | J | K | L | M | N |
|----|---------|----------|---------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 1  | Dolap   | İlaç Adı | Barkod        | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |   |   |   |   |   |
| 2  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 3  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 4  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 5  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 6  | Dolap   | İlaç Adı | Barkod        | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |   |   |   |   |   |
| 7  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 8  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 9  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 10 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 11 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 12 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 13 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 14 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 15 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |

Hazır

Alınan raporun EXCEL'e aktarılması



## Stok Raporları

 Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Raporu, herhangi bir Excel dosyasına kopyalamak için tıklayınız. Kopyalamak istediğiniz Excel dosyasına "Yapıştır" demeniz yeterlidir.

Copy CSV Excel PDF Print

Her sayfada 25 kayıt göster

Ara:

| Dolap   | İlaç Adı | Barkod         | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |
|---------|----------|----------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |
| Dolap 5 | Rotarix  | 08699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Sensorium.csv - Microsoft Excel

Giriş Ekle Sayfa Düzeni Formüller Veri Gözden Geçir Görünüm Eklentiler

Yapıştır Pano Yazı Tipi Hizalama Sayı Stiller Hücreler Düzenleme

Genel Koşullu Biçimlendirme Tablo Olarak Biçimlendir Hücre Stilleri

Σ Ekle Sırala ve Filtre Uygula Bul ve Seç

|    | A       | B        | C             | D         | E              | F      | G          | H                | I     | J | K | L | M | N |
|----|---------|----------|---------------|-----------|----------------|--------|------------|------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 1  | Dolap   | İlaç Adı | Barkod        | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |   |   |   |   |   |
| 2  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031398 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 3  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031174 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 4  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031510 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 5  | Dolap 5 | Rotarix  | 8699522967513 | A41CB140A | 20340310031518 | 120831 | Admin Demo | 10.09.2011 11:27 | Giriş |   |   |   |   |   |
| 6  | Dolap   | İlaç Adı | Barkod        | Lot No    | Seri No        | SKT    | Personel   | Tarih            | İşlem |   |   |   |   |   |
| 7  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 8  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 9  |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 10 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 11 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 12 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 13 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 14 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |
| 15 |         |          |               |           |                |        |            |                  |       |   |   |   |   |   |

Hazır

Alınan raporun EXCEL'e kopyalanması.

## Sıcaklık Analizleri

**sensorium** Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Isı Analizi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Dolap Dolap 1

Rapor Tipi Grafik Olarak Göster

Gönder

Dolaplarımızın geriye dönük Isı Analiz verilerine ulaşmak

Analiz etmek istediğiniz tarih aralığını belirtiniz.

Analiz etmek istediğiniz dolabı seçimini yapınız.

Analiz verisini almak istediğiniz formatı belirtiniz. (Grafik ya da Liste)



Grafik şeklinde sıcaklık analiz verileri

**sensorium** Stok Giriş Stok Çıkış Stok Raporları Isı Analizleri Admin Demo Çıkış

Her sayfada 10 kayıt göster

Copy CSV Excel PDF Print

Ara:

| Dolap   | Isı  | Ortam Isısı | Ortam Nem | Güç | Kapak  | Tarih            |
|---------|------|-------------|-----------|-----|--------|------------------|
| Dolap 1 | 5.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:00 |
| Dolap 1 | 4.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:04 |
| Dolap 1 | 2.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:08 |
| Dolap 1 | 4.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:12 |
| Dolap 1 | 5.00 | 26.00       | 53.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:16 |
| Dolap 1 | 3.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:21 |
| Dolap 1 | 4.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:29 |
| Dolap 1 | 5.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:33 |
| Dolap 1 | 2.00 | 26.00       | 52.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:37 |
| Dolap 1 | 3.00 | 26.00       | 53.00     | Var | Kapalı | 18.09.2011 00:41 |

Toplam 194 kayıttan 1 ve 10 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki Son Sayfa

Liste şeklinde sıcaklık analiz verileri

## Dolap Tanımları

Isı ve Nem Kontrol cihazınızın ID numarasıdır. Hangi ID numaralı cihazı, hangi dolap için kullanıyorsanız, ilişkilendirmeliyiz. Dolaplarınızın isimlerini sisteme tanımlamalıyız.

**Dolap Tanımları**

| Seri No | Dolap Adı  | Ağı Sayısı |
|---------|------------|------------|
| 34565   | Dolap 1    | 0          |
| 34566   | Dolap 3    | 0          |
| 34568   | Dolap 2    | 0          |
| 34567   | Yeni Cihaz | 0          |

**Kullanıcı Tanımları**

Copy CSV Print

Sisteme giriş yapabilecek kullanıcılar bu bölümde tanımlanır.

Her sayfada 25 kayıt göster

| Ad-Soyad       | GSM               | E-posta              | Dil | Yetki     | Görevler    |
|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----------|-------------|
| Admin Demo     | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Yönet     | Düzenle     |
| Erkan Tokyürek | 0 (541) 604 28 34 | erkan@doruktip.com   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| User Demo      | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| Volkan Bilmiş  | 0 (533) 598 83 83 | volkan@trex.com.tr   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için tıklayınız.

Yeni Kullanıcı

## Kullanıcı Tanımları

Kullanıcı Kayıt Düzenle

Ad - Soyad: Volkan Bilmiş

GSM: (0533) 598 83 83

E-Posta: volkan@trex.com.tr

Dil: Türkiye

Kullanıcı Adı: volkan

Parola: \*\*\*\*\*

Kullanıcı Yetkileri: Kullanıcı

Güncelle

Sistemin uyarı göndereceği GSM ve e-mail bilgileridir. Tanımlı tüm kullanıcılara uyarı gönderilmektedir. (Sisteme maksimum 5 kullanıcı tanımlanabilir.)

Kullanıcıların bilgilerini ve yetkilerini düzenlemek için tıklayınız.

**Kullanıcı Tanımları**

Copy CSV Print

Sisteme giriş yapabilecek kullanıcılar bu bölümde tanımlanır.

Her sayfada 25 kayıt göster

| Ad-Soyad       | GSM               | E-posta              | Dil | Yetki     | Görevler    |
|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----------|-------------|
| Admin Demo     | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Yönet     | Düzenle     |
| Erkan Tokyürek | 0 (541) 604 28 34 | erkan@doruktip.com   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| User Demo      | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| Volkan Bilmiş  | 0 (533) 598 83 83 | volkan@trex.com.tr   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için tıklayınız.

Yeni Kullanıcı

## Kullanıcı Profil ve Yetki Düzenleme

Kullanıcı Kayıt Düzenle

Ad - Soyad: Volkan Bilmiş

GSM: (0533) 598 83 83

E-Posta: volkan@trex.com.tr

Dil: Türkiye

Kullanıcı Adı: volkan

Parola: \*\*\*\*\*

Kullanıcı Yetkileri: Kullanıcı

Güncelle

Sistemin uyarı göndereceği GSM ve e-mail bilgileridir. Tanımlı tüm kullanıcılara uyarı gönderilmektedir. (Sisteme maksimum 5 kullanıcı tanımlanabilir.)

Kullanıcıların bilgilerini ve yetkilerini düzenlemek için tıklayınız.

**Kullanıcı Tanımları**

Copy CSV Print

Sisteme giriş yapabilecek kullanıcılar bu bölümde tanımlanır.

Her sayfada 25 kayıt göster

| Ad-Soyad       | GSM               | E-posta              | Dil | Yetki     | Görevler    |
|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----------|-------------|
| Admin Demo     | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Yönet     | Düzenle     |
| Erkan Tokyürek | 0 (541) 604 28 34 | erkan@doruktip.com   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| User Demo      | 0 (533) 445 92 66 | fehmi.buge@gmail.com | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |
| Volkan Bilmiş  | 0 (533) 598 83 83 | volkan@trex.com.tr   | tr  | Kullanıcı | Sil Düzenle |

Toplam 4 kayıttan 1 ve 4 arası görüntüleniyor.

İlk Sayfa Önceki 1 Sonraki Son Sayfa

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için tıklayınız.

Yeni Kullanıcı

## Sistem Ayarları

**Sistem Ayarları**

Dolap ısı değerleri, minimum ve maksimum değerlerinin dışına çıktığında e-posta gönder.

1. E-Posta Kullanıcısı: Volkan Bilmi Kaydet İptal

2. E-Posta Kullanıcısı: User Demo Kaydet İptal

3. E-Posta Kullanıcısı: Admin Demo Kaydet İptal

Dolap ısı değerleri, minimum ve maksimum değerlerinin dışına çıktığında SMS gönder.

1. SMS Kullanıcısı: Volkan Bilmi Kaydet İptal

2. SMS Kullanıcısı: User Demo Kaydet İptal

3. SMS Kullanıcısı: Admin Demo Kaydet İptal

email ve SMS ile uyarı sisteminin konfigüre edildiği bölümdür.

